

2020年8月11日

国立大学法人 広島大学病院 御中

作業報告書

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。

下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	Biograph mCT-S(64) 4R	作業番号	728200866768 / 16
シリアル番号	11062	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108445	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018079-NP01	契約区分	契約あり
		報告者	南亮

作業・サービス内容

【訪問理由/システム状況・現象等】

保守点検後の装置動作確認作業。

【作業内容/推定・特定した原因】

保守点検実施に伴い、装置動作確認作業を実施致しました。

始業点検項目及び検査1例実施いただき、装置動作正常であることを確認致しました。

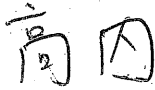

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2020/08/11	南亮	71000735	09:00	1.25	1.25	0.00	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

お客様ご確認 	弊社確認  南亮 2020年8月11日
--	--

シーメンスヘルスケア株式会社
 〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
 ゲートシティ大崎ウエストタワー
 カスタマーケアセンター 0120-041-387

国立大学法人 広島大学病院

御中

作業報告書

毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。
下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名・ユニット名	Biograph mCT-S(64) 4R	作業番号	728200866769
装置シリアル番号	11062	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108445	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018079-NP01	契約区分	契約内
		報告者	神田 雄基

作業・サービス内容

<p>【訪問理由/システム状況・現象等】</p> <p>第2 回定期点検作業(年4 回) エックス線管使用量:63697 スキャン秒【2020年05月09日使用開始】 校正用線源使用時間 円柱ファントム:12:10-13:00 ラインソース:12:00-12:10</p> <p>【作業内容/推定・特定した原因】</p> <p>点検手順書の項目に従い作業を実施致しました。 PETガントリー部及び患者テーブル部を中心に点検を実施致しました。 その他、詳細な実施項目に関しましては後日郵送されます点検報告書をご参照ください。 点検作業におきまして異常となる箇所はございませんでした。 最終動作確認として、日常の一連の動作(システムのオフオン、チェックアップ、PET-QC、2Bed Test、通信テスト)を実施しました。動作に異常が無いことを確認致しました。 追加項目として、データベースの再構築、PETガントリーの検出器フルセットアップを実施しました。</p> <p>【特記事項】</p> <p>PET装置のフルセットアップ最中に校正用線源の減衰値が警戒域に到達していることが確認できました。(現在値が18.5MBqで危険域が11.1MBqとなります)線源の交換を推奨しております。</p>

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2020/11/14	神田 雄基	71002258	09:00	5.00	0.00	5.00	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分
10161717 ¥filter-mat	10161717	1	契約あり

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

お客様ご確認	弊社確認
高内 2020年11月14日	神田 神田 雄基 2020年11月14日

シーメンスヘルスケア株式会社
 〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
 ゲートシティ大崎ウエストタワー
 カスタマーケアセンター 0120-041-387

2021年2月23日

国立大学法人 広島大学病院

御中

作業報告書

毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。
下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名・ユニット名	Biograph mCT-S(64) 4R	作業番号	728200866770
装置シリアル番号	11062	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108445	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018079-NP01	契約区分	契約あり
		報告者	南亮

作業・サービス内容

<p>【訪問理由/システム状況・現象等】</p> <p>第3 回定期点検作業(年4 回)</p> <p>校正用線源使用時間 円柱ファントム : 10:20~10:40 ラインソース : 10:10~10:20</p> <p>【作業内容/推定・特定した原因】</p> <p>部品準備が整いましたので、2月13日実施の保守点検時に交換未実施となっていた、CTガントリー電源供給ブラシの交換作業を実施致しました。 交換後、システム再起動、チェックアップ、アイソセンター調整(GantryOffset)、PETクオリティチェック、テストスキャンの実施にて、装置動作正常であることを確認致しました。</p>
--

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2021/02/23	南亮	71000735	09:00	2.00	0.00	2.00	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分
10494871 ¥CPT Brushblock CANless	10494871	1	

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

お客様ご確認	弊社確認
<p>高内</p> <p>2021年2月23日</p>	<p>南亮</p> <p>2021年2月23日</p>

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387